

HANDLEIDING

Microphone Kit



Belangrijk om te weten: dit is de handleiding voor de nieuwe app die op 10 augustus 2026 is uitgebracht.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Laatste versie is te vinden op <https://speak-see.com/nl/pages/manual>

© Speaksee 2026. Alle rechten voorbehouden.

INHOUD

ONDERDELEN OVERZICHT	3
In de doos van de Microphone Kit	3
Sticker op de doos	4
Speaksee Microfoons	4
Basisstation	5
Oplaad accessoires	6
INSTALLATIE	7
Volg de stappen van de Handleiding	7
DAGELIJKS GEBRUIK	14
Zet de Microphone Kit aan	15
Het dragen van de microfoons	17
Ondertitelen van gesprekken	18
Herkennen van de batterij status	19
De Microphone Kit uitzetten	20
De Microphone Kit opladen	20
Firmware updates	21
Instellingen aanpassen	23
Instellingen van de app aanpassen	23
Hulp bij het navigeren door de app	23
Informatie over je Microphone Kit	23
Een extra Microphone Kit toevoegen	24
Ondersteuning & Juridisch	26
De instellingen aanpassen in Transcription	27
Vertaling	28
De naam van de microfoon wijzigen	29
De sessie opslaan	29
Leesbaarheid aanpassen	30
De sessie delen	31
Toetsenbordfunctie	32
VERBINDINGSMODUS WIJZIGEN	33
Verbinden via Bluetooth	33
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	35
Legenda van basisstation lampjes	35
Legenda van het microfoon lampje	39
Legenda aan/uit-knop bediening	41
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	42
Wachtwoord opnieuw instellen	43
JURIDISCHE INFORMATIE	45
Belangrijk advies	47
Voorzorgsmaatregelen	48
CONTACTGEGEVENS	49

ONDERDELENOVERZICHT

In de doos van de Microphone Kit



De Microphone Kit bevat de volgende onderdelen en accessoires:

- 1 x Basisstation
- 3 x Microfoon
- 9 x Kleurenpuck
- 3 x Nekkoord
- 1 x Internationale adapter
- 1 x USB-C kabel
- 1 x Opbergetui

Samen met de volgende afgedrukte documentatie:

- Snelstartgids
- Legal Information Card


Sticker op de doos

De sticker op de doos bevat informatie met betrekking tot je Microphone Kit.

- MAC (LAN1): verwijst naar het
 - Wi-Fi-MAC-adres.
- MAC (LAN2): verwijst naar het
 - Ethernet MAC-adres.
- SN: is het unieke serienummer van je Microphone Kit, dit is dezelfde code die op de achterkant van het basisstation staat afgedrukt.



Speaksee Microfoons

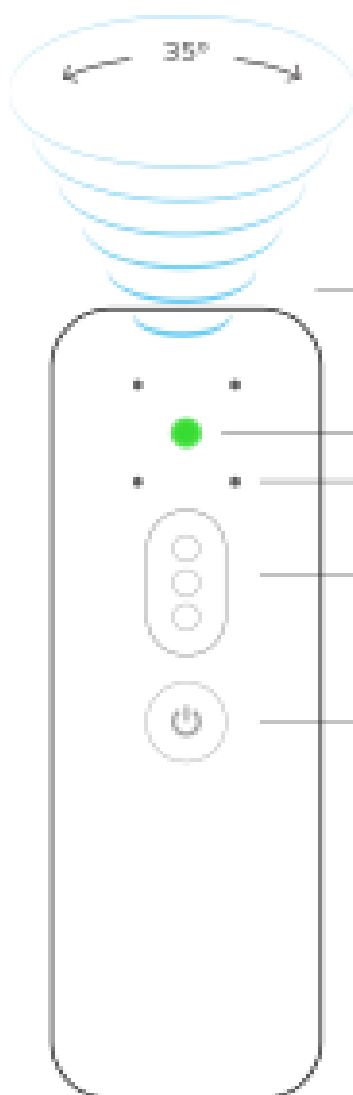

1. Gerichte spraakdetectie

Om de stem op te vangen van de persoon die het draagt.

2. Lampje

Geeft de status van de microfoon aan. Zie de legenda van het microfoon lampje voor een volledig overzicht.

3. Microfoon-ontvangers

Om direct te luisteren en ondertitelen wat er gezegd wordt.


4. Gekleurde puck

Bij elke Microphone Kit worden negen verschillende kleuren geleverd.

5. Aan/uit-knop

Nadat je het basisstation hebt ingeschakeld, zet je de microfoons aan door op deze aan/uit-knop te drukken.

Basisstation

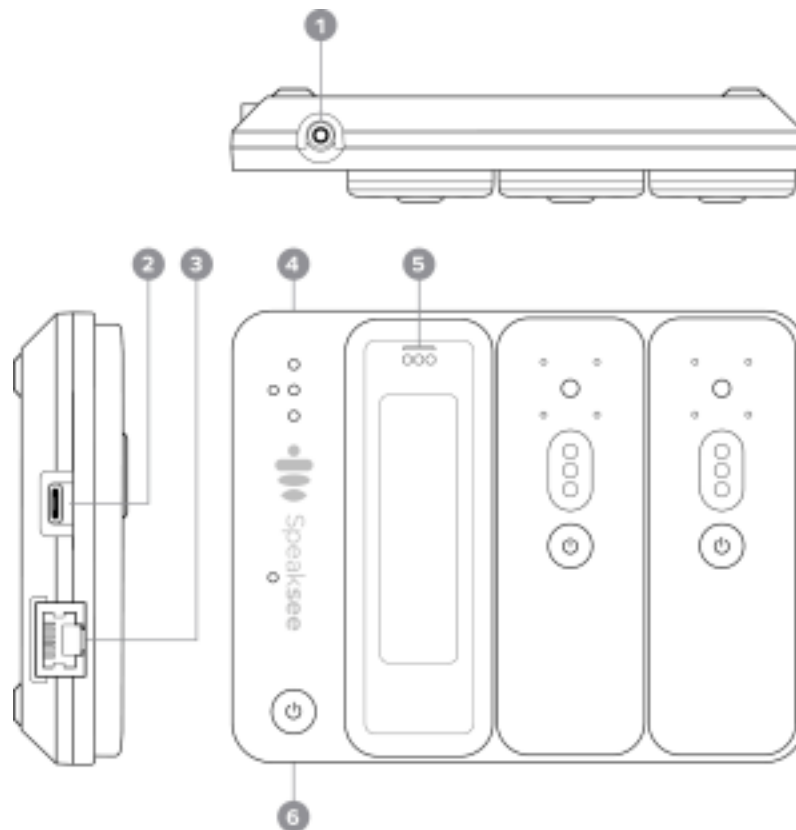

1. Audio-aansluiting

Sluit een apparaat aan waarvan je de audio wilt ondertitelen. Denk hierbij aan je smartphone of je TV. Verbind deze door middel van een 3.5 mm audiokabel.

Let op: Deze functie wordt nog niet volledig ondersteund.

4. Lampjes

Om de status van het basisstation aan te geven. Zie de legenda van de basisstation lampjes voor een volledig overzicht.

2. USB-C oplaadaansluiting

Gebruik deze aansluiting om je Microphone Kit op te laden.

5. Oplaad pinnen

Om de microfoons aan te sluiten op het basisstation om ze op te laden.

3. Ethernet-aansluiting


Maak via deze poort verbinding met kabelinternet, als alternatief voor wifi (deze poort wordt niet gebruikt).

6. Aan/uit-knop

Druk hierop om het basisstation aan te zetten. Zet vervolgens de microfoons afzonderlijk aan.

Oplaad accessoires

Gebruik voor het opladen van de Microphone Kit uitsluitend de bijgeleverde adapter en kabel.

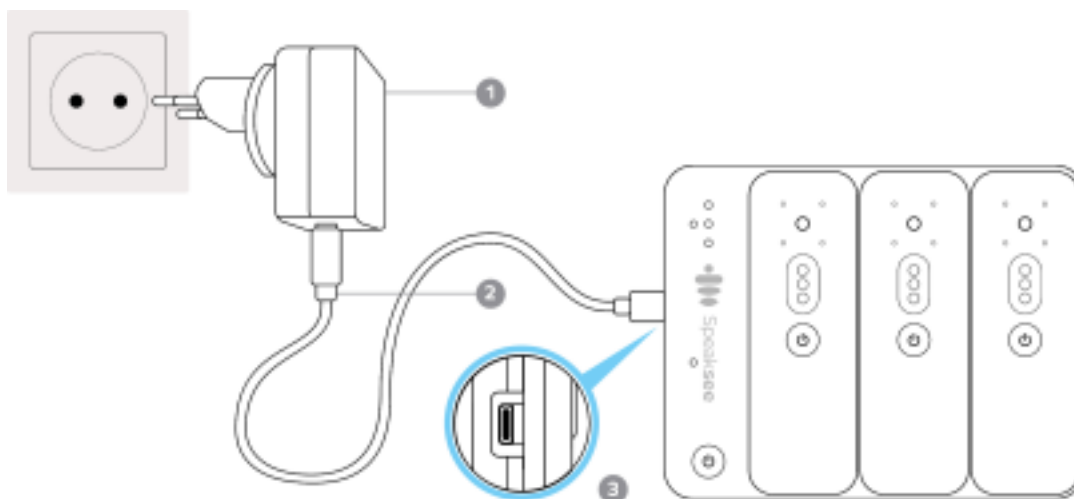

1. Internationale adapter

Verwissel de adapter-kop om hem aan te passen aan je stopcontact.

2. USB-C Kabel

Om de adapter aan te sluiten op het basisstation.

3. USB-C Ingang


Steek de USB-C-kabel in deze poort van het basisstation.

INSTALLATIE

Volg de stappen van de Handleiding

In het binnenvak van de opbergetui van de Microphone Kit bevindt zich een boekje (snelstartgids).

Deze ziet er als volgt uit:

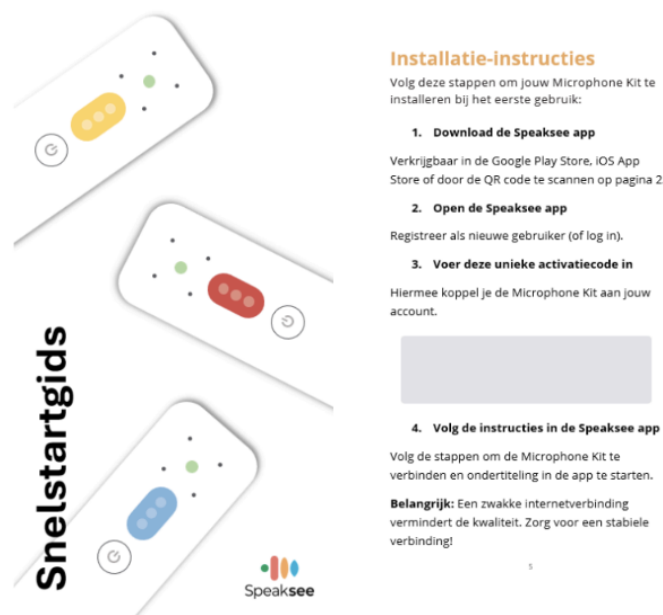

Getoond voorbeeld van productie run 2025

Ga aan de slag door deze 3 stappen te volgen en gebruik de activatiecode om je apparaat aan te sluiten:

1. Installeer de Speaksee app

Verkrijgbaar in de Google Play Store, iOS App Store of door de QR code te scannen uit de snelstartgids of ga naar: speak-see.com/setup


2. Stel je Microphone Kit in.

Volg de instructies in de app om je Microphone Kit in te stellen. Je wordt gevraagd om de activatiecode te gebruiken die op de snelstartgids staat afgedrukt.

Let op: De activatiecode kan maar één keer gebruikt worden. Als je Speaksee op een ander apparaat wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je met hetzelfde account inlogt.

3. Veel plezier met ondertitelen!

Volg de stappen in de Speaksee App

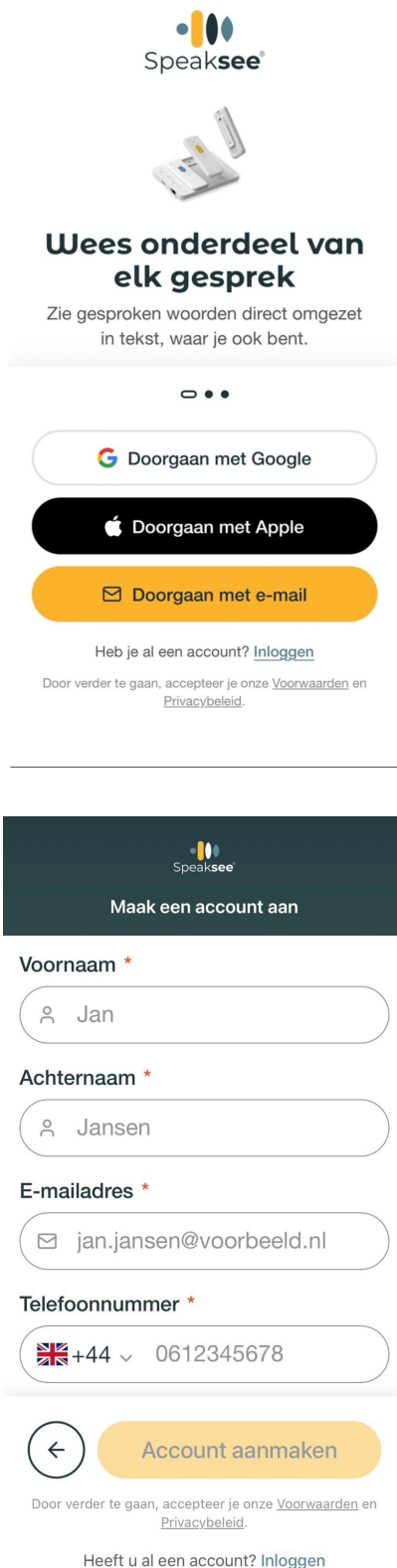

The image shows two screenshots of the Speaksee app. The top screenshot is the home screen, featuring the Speaksee logo at the top, an illustration of the microphone kit, and the headline 'Wees onderdeel van elk gesprek'. Below this, it states 'Zie gesproken woorden direct omgezet in tekst, waar je ook bent.' There are three buttons: 'Doorgaan met Google', 'Doorgaan met Apple', and 'Doorgaan met e-mail'. At the bottom, there is a link to 'Inloggen' and a note about terms and conditions.

The bottom screenshot is the 'Maak een account aan' (Create an account) screen. It has a dark header with the Speaksee logo and the title 'Maak een account aan'. The form includes fields for 'Voornaam *' (First name), 'Achternaam *' (Last name), 'E-mailadres *' (Email address), and 'Telefoonnummer *' (Phone number). Each field has a small icon and a red asterisk indicating it is required. The 'Voornaam' field contains 'Jan', 'Achternaam' contains 'Jansen', 'E-mailadres' contains 'jan.jansen@voorbeeld.nl', and 'Telefoonnummer' shows a dropdown for the country code '+44' and the number '0612345678'. At the bottom, there is a back arrow button and an 'Account aanmaken' (Create account) button. Below the button, there is a link to 'Inloggen' and a note about terms and conditions.


1. Account aanmaken

Als je nog geen Speaksee account hebt, druk dan op de "Account aanmaken" knop. Heb je al een account? Dan kun je op "Log in" drukken. Ga verder met stap 3. Heb je al een account voor Speaksee AutoCaption? Dan kun je inloggen met dezelfde gegevens.

Vul het volledige formulier in om je Speaksee account aan te maken.

Let op: Speciale tekens zijn niet toegestaan in de naam velden. Voor de gesprekstaal kun je de taal selecteren van de audio die de microfoons ontvangen.


Kies je eigen wachtwoord om in te kunnen loggen op je Speaksee account, dit is **NIET** de unieke activatiecode op je handleiding.

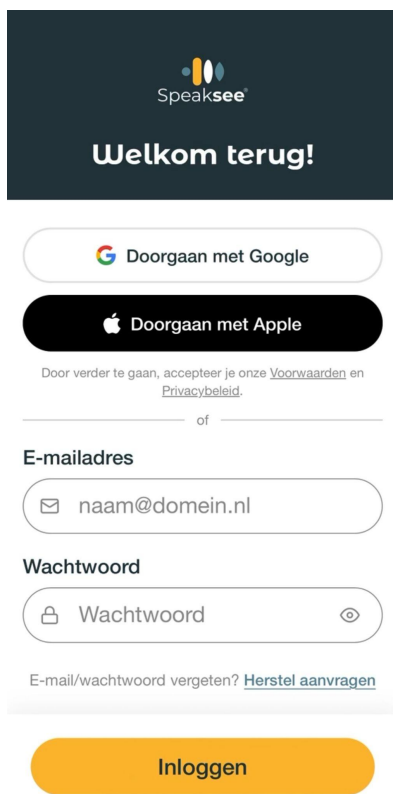

2. Je account verifiëren

Nadat je je account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail om je account te verifiëren. Klik op de link in de e-mail en je account wordt geverifieerd.

Nadat je op de link hebt geklikt, kun je teruggaan naar de app en inloggen met je Speaksee-account.

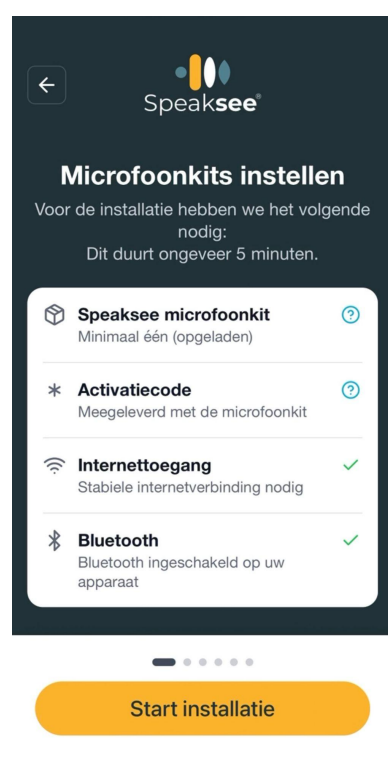

3. Schakel Bluetooth in

(en locatie, alleen voor Android-gebruikers)

Om de Microphone Kit met je telefoon of tablet te verbinden, moet Bluetooth zijn ingeschakeld.


Opmerking: Android-gebruikers moeten ook hun locatie inschakelen.




4. Voer de activeringscode in

Voer de activeringscode in die staat vermeld op het document in de doos van je Microphone Kit.


Let op: de activeringscode kan alleen voor één account worden gebruikt. Als je twee Microphone Kits verbindt, hebben deze elk hun eigen verificatiecode, die beide moeten worden geïnstalleerd. Dit kun je daarna in de app doen.

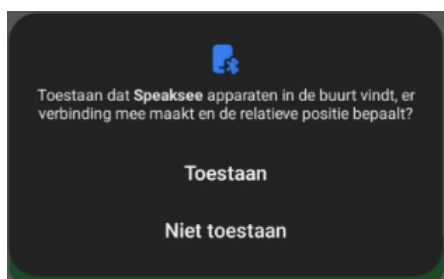

5. Geef de Speaksee Microphone Kit toestemming om apparaten in de buurt te zoeken (alleen voor Android) Klik op 'Toestaan' in het pop-upbericht, zodat de app verbinding kan maken met je Microphone Kit.

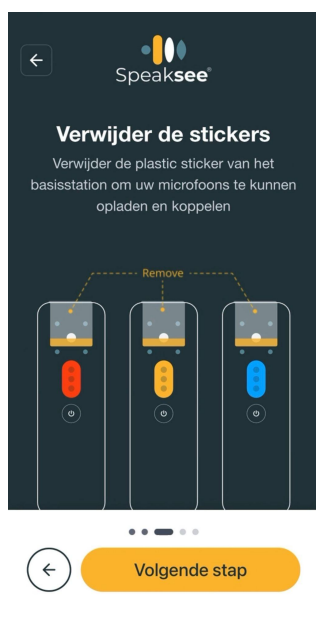

6. Verwijder de stickers van de microfoons.

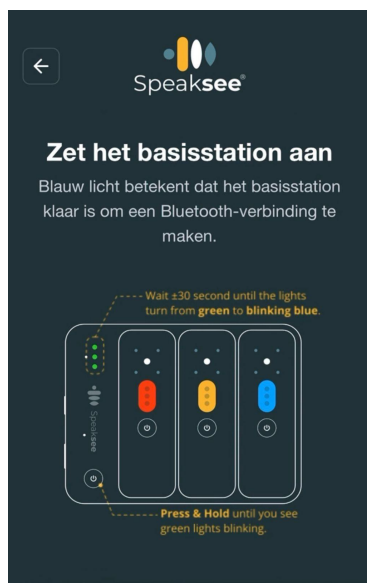


6. De Microphone Kit aanzetten

Klik op de aan/uit-knop van het basisstation om de Microphone Kit aan te zetten. Je zult zien dat alle 3 de lampjes groen worden en gaan knipperen. Als de lampjes blauw beginnen te knipperen, is de Microphone Kit klaar om een bluetooth-verbinding op te zetten. Je kunt op "Volgende" drukken.



Je Microphone Kit zou nu volledig verbonden moeten zijn.

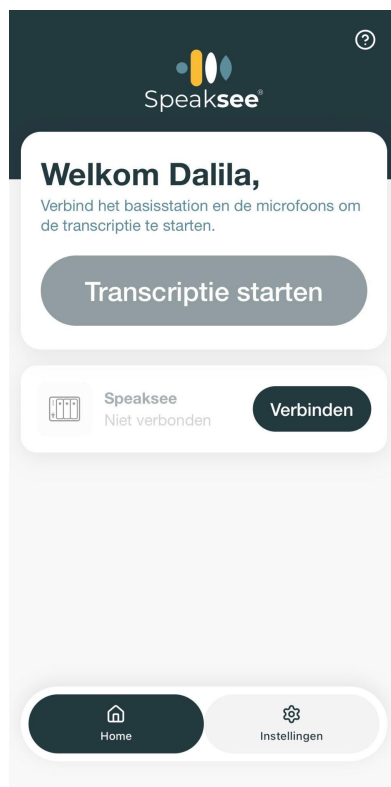

7. De Microphone Kit koppelen aan je telefoon


Als je de app opent en onder 'Microphone Kit' de melding 'Niet verbonden' ziet staan, klik dan op 'Verbinden' om de app aan je Microphone Kit te koppelen.

Zodra de Microphone Kit met de naam Speaksee is gevonden, kun je op 'Koppelen' drukken.



Zoeken naar microfoonkit...

Zet uw microfoonkit aan door op de aan/uit-knop te drukken

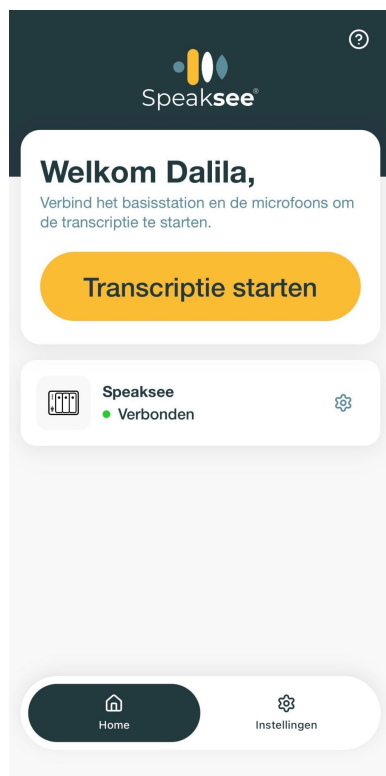


9. Klaar voor gebruik

Je bent nu klaar om je Microphone Kit te gebruiken. Ga naar de volgende pagina voor instructies over het gebruik van je Microphone Kit.

DAGELIJKS GEBRUIK

Deze Microphone Kit ondertitelt direct wat mensen zeggen, zelfs in groepen en bij achtergrondgeluid.

Gebruik de Speaksee app op je smartphone, tablet of laptop en bekijk wie wat zegt. De spraak die door elke microfoon wordt opgepikt, wordt in een andere kleur weergegeven.

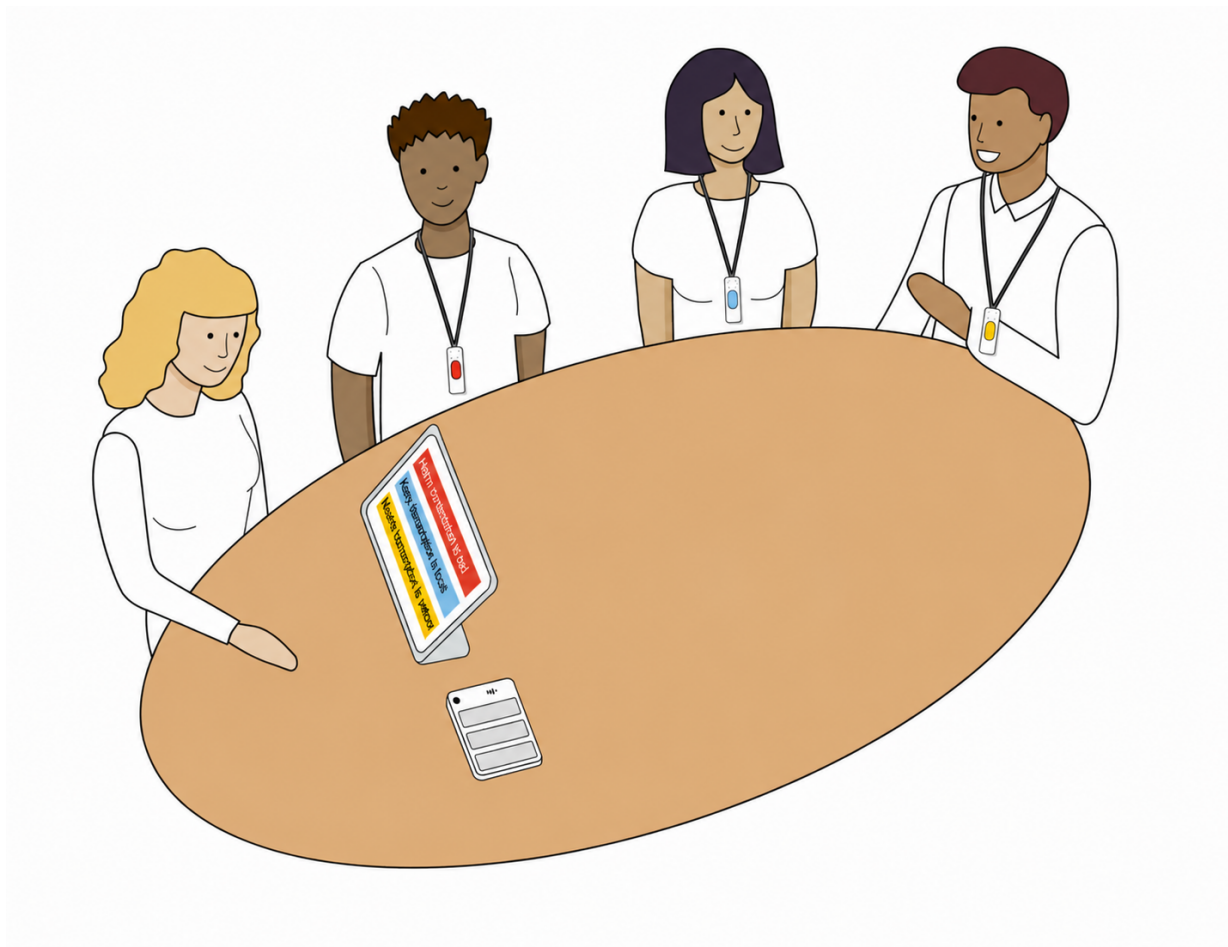

Je gesprekken zijn beveiligd

Voel je vrij om de Microphone Kit in elke omgeving te gebruiken. Jouw transcripties zijn hardware- en software versleuteld. Ook is de veiligheid van de Microfoon Kit op de proef gesteld door een team van IT-deskundigen van KPN. Hier zijn we voor geslaagd.

Belangrijk om te weten: we hebben ook een ISO-certificering.

Zet de Microphone Kit aan

Stel je Microphone Kit bij het eerste gebruik in volgens de stappen die worden beschreven in het hoofdstuk „Installatie”. Open bij elk gebruik eerst de app. Zet vervolgens het basisstation aan. Neem ten laatste elke microfoon die je wilt gebruiken van het basisstation af en zet ze één voor één aan.


1. Open de app

Open de Speaksee-app op je telefoon voordat je het basisstation aanzet. Als je de app nog niet hebt gedownload, kun je dat doen via de Apple App Store of Google Play.

2. Zet het basisstation aan

Voordat je de microfoons inschakelt, schakel je het basisstation in door de aan/uit-knop 1 seconde in te drukken.

De 3 lampjes knipperen eenmaal groen om aan te geven dat het apparaat wordt ingeschakeld. Het opstarten duurt ongeveer 5 seconden, waarin het probeert verbinding te maken met je smart device.

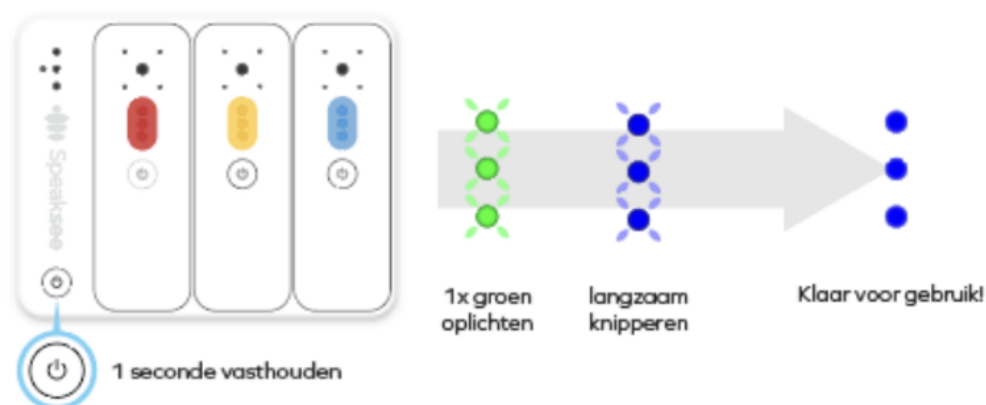


Zodra de lampjes continu blauw branden, is het basisstation klaar voor gebruik. Je kunt nu op “Start ondertitelen” drukken en de lampjes worden constant groen.



LET OP: Als je het basisstation inschakelt en de app opent, kan er een software-update verschijnen. Een software-update is te herkennen aan 3 rode lampjes, lees het hoofdstuk Software updates voor een gedetailleerde uitleg.

3. Klik op 'Start transcriptie'

Zodra je in de app bent en het basisstation is ingeschakeld, klik je op 'Start transcriptie' op de startpagina.

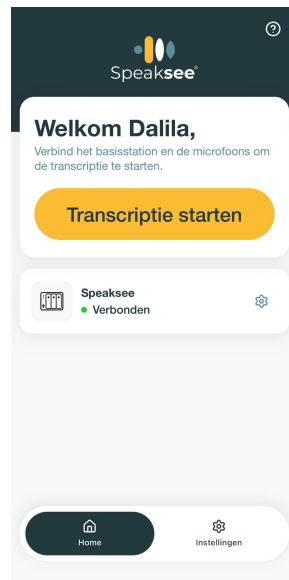

4. Zet de microfoons aan

Zodra het basisstation is aangezet, zet je elke microfoon aan door hem uit het basisstation te halen en de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt te houden:




Het lampje knippert groen om aan te geven dat de microfoon aan het opstarten is. Dit duurt ongeveer 3 seconden. Zodra de microfoon continu groen brandt, is de microfoon klaar voor gebruik. Je kunt nu de microfoons uitdelen aan elke spreker.

Het dragen van de microfoons


Elke spreker moet een microfoon dragen om een gesprek zo goed mogelijk te kunnen ondertitelen. Om de stem van de persoon die hem draagt goed op te vangen, is het belangrijk dat de microfoon omhoog wijst in de richting van de mond van de spreker. Ook moet het lampje zichtbaar zijn, naar voren gericht

Nekkoord

Bevestig het nekkoord aan de microfoon door het magnetische bedeltje aan de achterkant van de microfoon vast te klemmen.

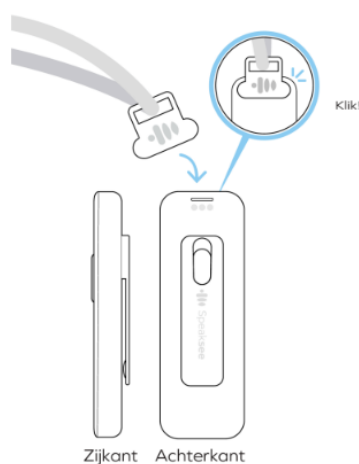

Het is belangrijk dat elke spreker een microfoon draagt voor de beste resultaten. Zorg ervoor dat de microfoon omhoog wijst in de richting van de mond en dat het lampje zichtbaar is en naar voren wijst. Dit helpt de stem van de spreker beter te herkennen en de nauwkeurigheid van de transcripties te verbeteren.

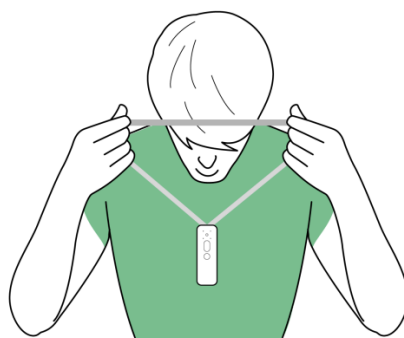


Ondertitelen van gesprekken

De nauwkeurigheid is het best wanneer iedereen in het gesprek duidelijk articuleert en hoorbaar (luid genoeg) spreekt. Het is het beste om alle deelnemers aan het gesprek hierover van tevoren te informeren.

In de app

Zodra de Microphone Kit is ingeschakeld kun je in de app op de knop "Start ondertitelen" drukken. Elke spreker kan nu beginnen met praten en de ondertiteling verschijnt in de app.

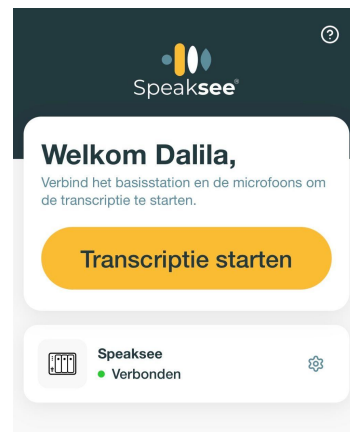


Via web browser

De app moet ook eerst op de telefoon/tablet geopend zijn en je moet op „Start Transcriptie“ hebben geklikt.

Deze functie is handig als je de transcriptie die op je telefoon/tablet wordt gegenereerd, ook op een computer/laptop wilt volgen. Om de transcriptie op de computer of laptop te bekijken, opent u een webbrowser en gaat je naar **speak-see.com/web**.

Log in met je Speaksee-account en selecteer de Microphone Kit die je wilt gebruiken.



Zolang de app op uw telefoon of tablet is geopend en werkt, zou deze hier ook moeten verschijnen. Elke spreker kan nu beginnen met praten en de transcripties verschijnen in de app.

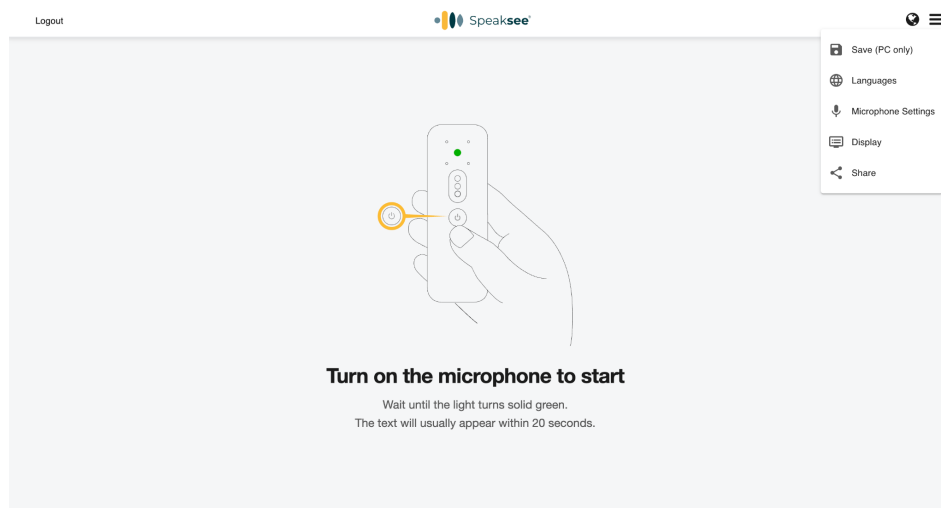

Herkennen van de batterij status

Tijdens het gebruik raakt de batterij van de Microphone Kit langzaam op. Het is goed om je hiervan bewust te zijn, om tijdig te herkennen wanneer de Microphone Kit opgeladen dient te worden.

De gemiddelde gebruikstijd voor elke microfoon is 4 uur. Dat betekent dat je met een 100% volle batterij een gesprek van 4 uur kunt voeren totdat de microfoon uitschakelt.

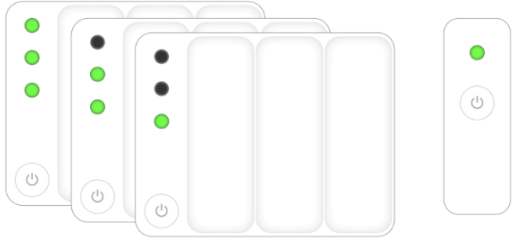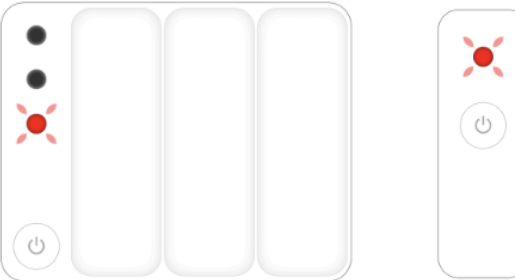Vol: Zolang de lampjes in groen branden tijdens het gebruik is de Microphone Kit voldoende opgeladen.	 batterij voldoende geladen voor gebruik
Bijna leeg: Als de batterij bijna leeg is, knippert het lampje afwisselend groen en rood.	 LET OP: batterij bijna leeg!
Batterij te leeg voor gebruik: In het geval dat er geen oplaad actie wordt ondernomen, zal de Microphone Kit automatisch uitschakelen naar standby. Dit wordt aangegeven door het 10x knipperen in rood van het lampje.	 automatische uitschakeling doordat de batterij leeg is


De Microphone Kit uitzetten

1. De microfoons

Voor het uitzetten van de microfoons voldoet het door simpelweg de microfoons terug te plaatsen in het basisstation. De microfoons worden dan opgeladen of automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij vol is.



2. Het basisstation

Houd de aan/uit-knop van het basisstation 1 seconde ingedrukt om het uit te zetten. De lampjes knipperen 1 keer rood, om aan te geven dat het apparaat uitschakelt. Als het basisstation niet op de oplader is aangesloten, moeten alle lampjes uitgaan.

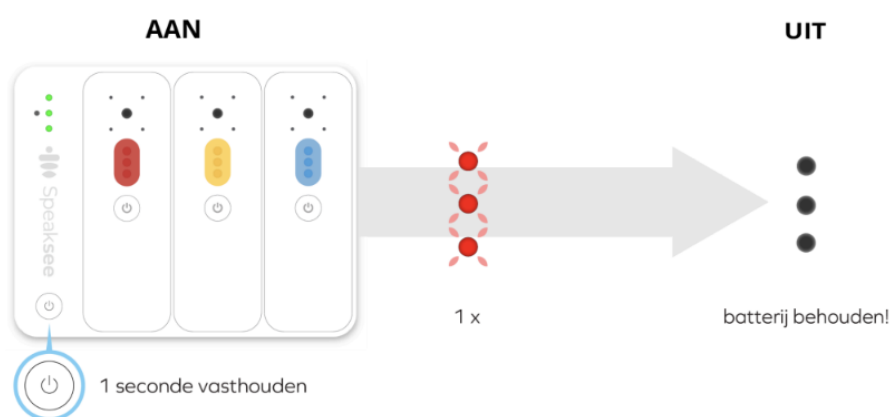

De Microphone Kit opladen


Tijdens het opladen lichten de lampjes wit op om de laadstatus van de batterij aan te geven.

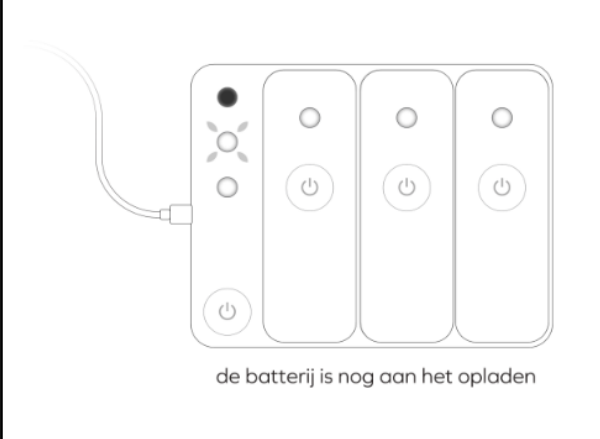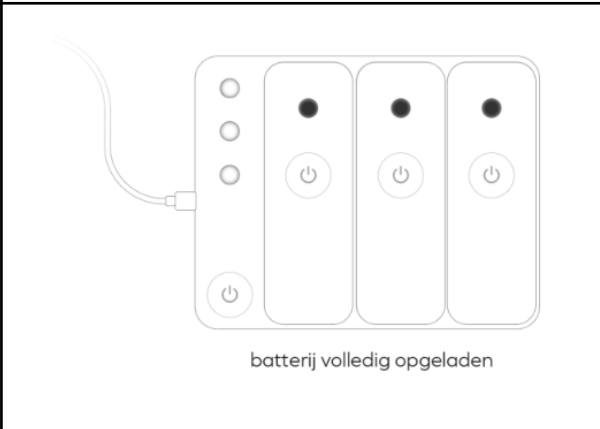 de batterij is nog aan het opladen	Aan het laden: Als het basisstation aan het laden is, knippert 1 van de lampjes in wit. Het opladen van de microfoons wordt aangegeven door het continue branden van het lampje in wit.
 batterij volledig opgeladen	Batterij is vol: Het basisstation is volledig opgeladen als de lampjes alle 3 continu wit Branden. Wanneer de microfoons volledig opgeladen zijn, zullen de lampjes juist uit blijven terwijl ze in het basisstation liggen.
Het basisstation opladen Om het basisstation op te laden dienen de USB-C kabel en adapter verbonden te worden zoals omschreven in het hoofdstuk over de oplaad accessoires. TIP: Het basisstation kan ook worden opgeladen tijdens gebruik! LET OP: laat de Microphone Kit niet op bij een omgevingstemperatuur hoger dan 35°C.	De microfoons opladen De microfoons worden automatisch opgeladen bij terugplaatsing in het basisstation. LET OP: De microfoons worden niet opgeladen wanneer het batterijniveau van het basisstation te laag is.

Firmware updates

Het wordt aanbevolen om de software van je Microphone Kit up-to-date te houden. Als er een nieuwe software-update beschikbaar is, wordt je gevraagd deze in de app goed te keuren. Tijdens een software-update branden de lampjes op het basisstation roze. Een update kan enkele minuten duren.

We informeren onze gebruikers vooraf via e-mail over alles wat ze moeten weten over de update. Hieronder vind je een overzicht van het updateproces. Eerst worden de lampjes op het basisstation constant roze. Daarna worden ook de microfoons roze, wat aangeeft dat de microfoons worden bijgewerkt. Zodra de update is voltooid, start de Microphone Kit opnieuw op en worden de lampjes blauw. Tijdens de update worden statusupdates gegeven in de app.

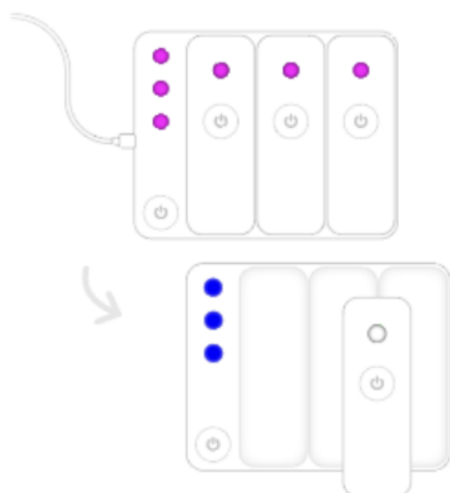

Het oplaadstation en de microfoons zijn aan het updaten.
Je kunt de status hiervan bijhouden in de app. Zodra de update klaar
is start de Microphone Kit opnieuw op om de update te voltooien.

App updates


Zorg ervoor dat onze app geüpdatet is naar de meest recente versie. We zijn altijd bezig met verbeteringen!

Instellingen aanpassen

Instellingen van de app aanpassen

Deze functies kunnen alleen worden gewijzigd wanneer je op de startpagina begint. Onderaan het scherm bevinden zich twee tabbladen: „Home“ en „Instellingen“. Hier kun je de functies van je app aanpassen.

Hulp bij het navigeren door de app

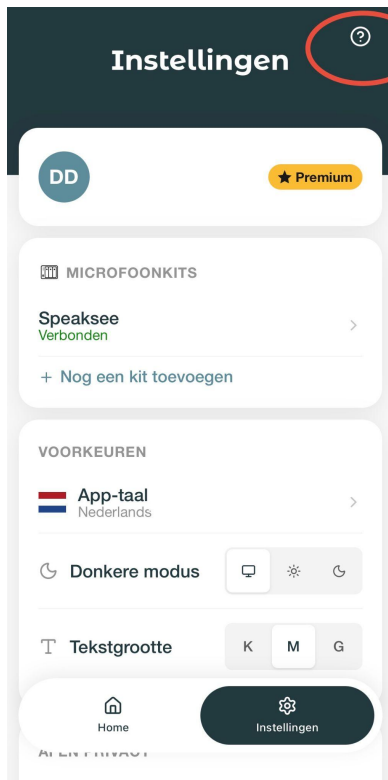


Als je op een bepaald moment in de app bent en niet zeker weet hoe iets op een pagina werkt, kun je altijd op het vraagteken in de rechterbovenhoek klikken.

Op elke pagina in de app zie je dit vraagteken. Hiermee krijg je een rondleiding door die pagina binnen de app.


Je kunt ook een volledige rondleiding door de app volgen. Je vindt deze door op het tabblad 'Instellingen' naast 'Home' te klikken. Onderaan de pagina 'Instellingen' zie je de tekst 'Volg een rondleiding'. Hiermee krijg je een rondleiding door de hele app.

Informatie over je Microphone Kit

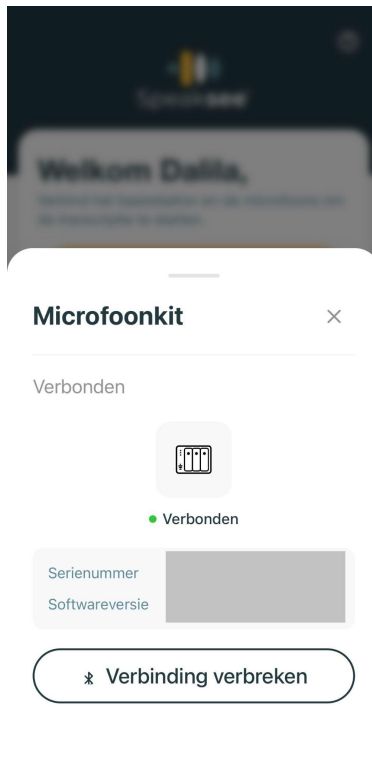

Onder 'Microphone Kits' zie je één kit die al is aangesloten. Als je op de kit klikt, ga je naar een pagina waar je ook het batterijniveau, de firmware en het serienummer kunt bekijken en je kit direct kunt updaten naar de nieuwe firmware. Je kunt je kit hier ook loskoppelen.

Een extra Microphone Kit toevoegen

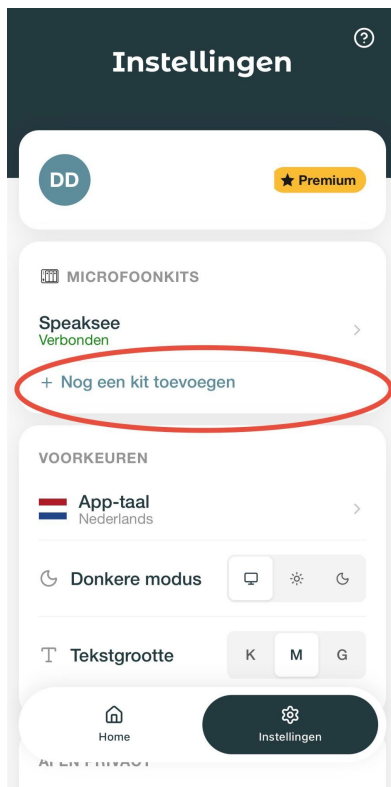


Onder 'Microphone Kit' zie je één kit die al is aangesloten.

Daaronder staat dat je 'Nog een kit toevoegen'. Hiermee ga je naar een installatiepagina.


Als je alles hebt wat op het scherm wordt gevraagd, kun je 'Start Instalatie' kiezen.

Je komt dan op een scherm waar je 'Je activeringscode invoeren' moet kiezen. Deze vind je in de doos bij je nieuwe Microphone Kit.

De volgende stappen zijn hetzelfde als toen je je Microphone Kit voor het eerst activeerde.

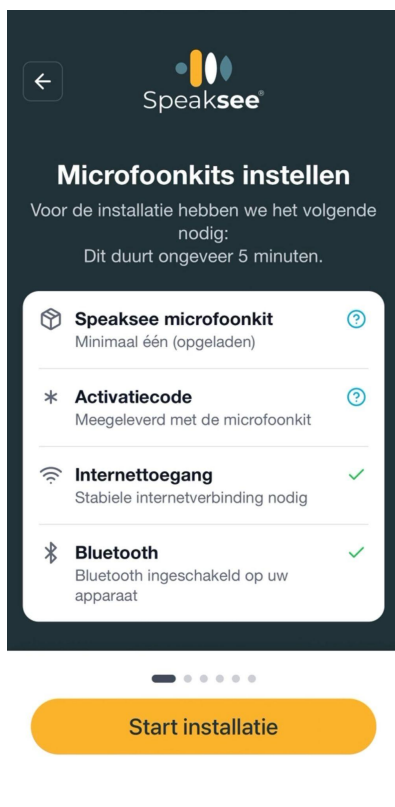

Voorkeuren

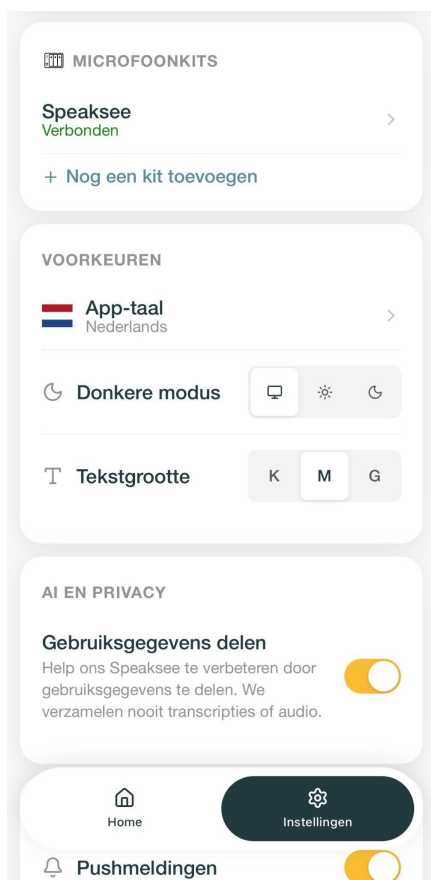

Taal van de app

Klik onder 'Voorkeuren' op 'Taal van de app' om de taal van de app naar wens aan te passen. Vergeet niet op 'Bevestigen' te klikken.

Dit heeft geen invloed op de invoer- of uitvoertaal van je transcriptie.


Donkere modus

Hier kunt je kiezen voor de donkere of lichte modus. Het pictogram met het computerscherf kiest de standaardmodus van je telefoon/tablet. Het zonpictogram maakt de app licht van kleur. Het maanpictogram zet de app in de donkere modus.

Tekstgrootte

Hier kun je de grootte van de tekst in de app aanpassen. Je kunt kiezen voor 'S' (klein), 'M' (middelgroot) of 'L' (groot).

Ondersteuning & Juridisch

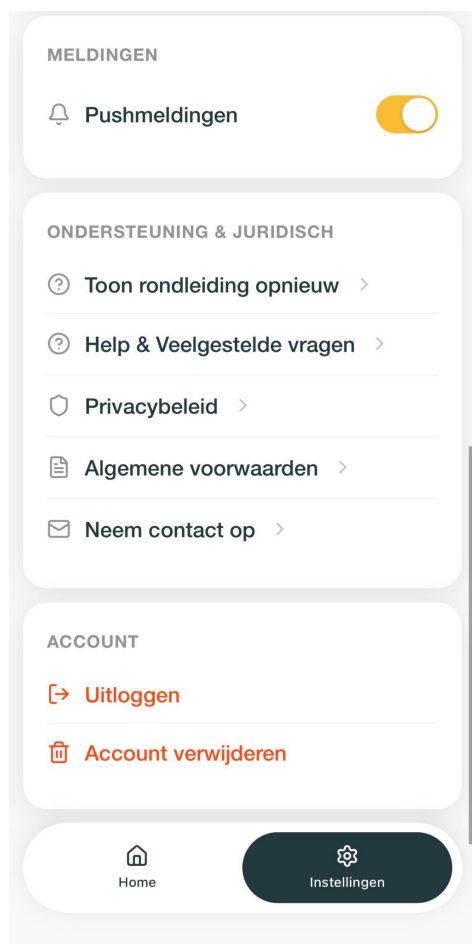

Rondleiding opnieuw weergeven

Als je hierop klikt, krijg je opnieuw een volledige rondleiding door de app. Je wordt langs alle pagina's geleid en krijgt uitleg over alles waarop je kunt klikken of over belangrijke functies.

Help & Veelgestelde vragen

Als je hierop klikt, ga je naar onze hoofdpagina voor ondersteuning. Hier vind je de meest gestelde vragen. Je kunt ook rechtstreeks een bericht sturen via een bot.

Als de bot je vraag niet kan beantwoorden, stuurt hij deze door naar de klantenservice.

Privacybeleid

Als je hierop klikt, ga je naar ons privacybeleid op onze hoofdwebsite.


Gebruiksvoorwaarden

Als je hierop klikt, ga je naar onze gebruiksvoorwaarden op onze hoofdwebsite.

Contact opnemen met de helpdesk

Als je hierop klikt, wordt je e-mailapp op je telefoon of tablet geopend. De e-mail wordt automatisch geadresseerd aan onze helpdesk. Zo kun je eenvoudig en snel contact opnemen met onze helpdesk.

Overige zaken

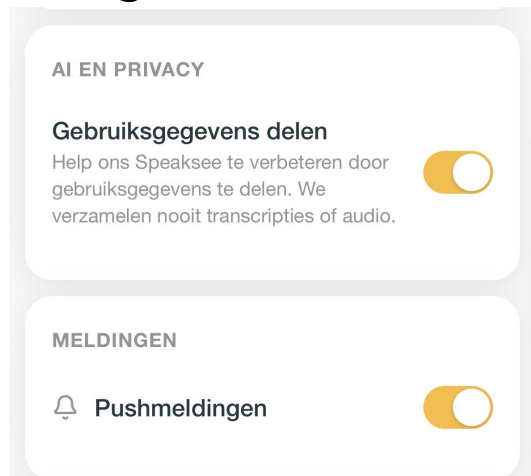

AI & Privacy

Als je deze schakelaar inschakelt, geef je toestemming om je gebruiksgegevens te gebruiken om onze app en functies te verbeteren. Pushmeldingen. Je kunt dit op elk moment weer uitschakelen.

Opmerking: We verzamelen **NOOIT** je transcripties of audio.

Meldingen

Pushmeldingen


Als je deze schakelaar inschakelt, geef je toestemming voor pushmeldingen. Je kunt dit op elk moment weer uitschakelen.

De instellingen aanpassen in Transcription

Dit zijn instellingen die je pas kunt wijzigen nadat je met de transcriptie bent begonnen. Je moet ook op 'Instellingen' in de rechterbovenhoek klikken.

Onder 'Instellingen' kun je instellingen aanpassen voor 'Deelnemers' en voor 'Toegankelijkheid'.

Vertaling

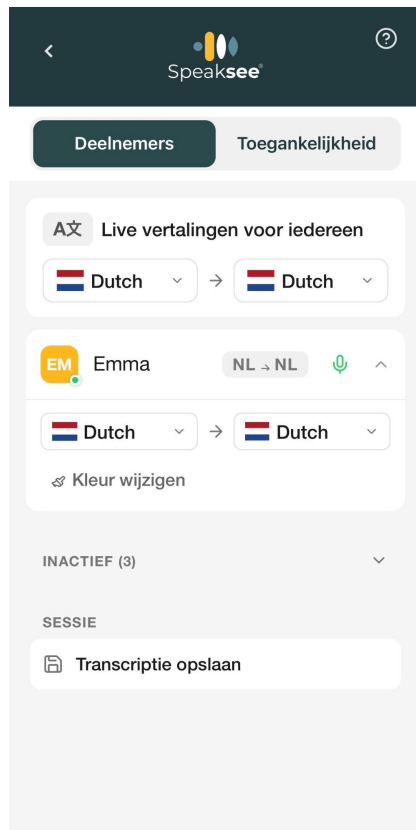

Klik op "Deelnemers". Op dit tabblad kun je de gesproken taal/brontaal en de transcriptie/doeltaal wijzigen.

Je kunt kiezen uit meer dan 80 talen om van en naar te vertalen.


In dit menu kun je zowel de invoer- als de uitvoertaal van de gesproken woorden selecteren. Als je niet wilt dat de uitvoertekst wordt vertaald, laat dan de taal hetzelfde als de gesproken taal.

Op het tabblad 'Elk' kun je de specifieke invoer- en uitvoertaal voor elke microfoon afzonderlijk instellen.

Als je klaar bent, druk je op de pijl in de linkerbovenhoek om terug te keren naar het gesprek.

Opmerking: Handig voor situaties waarin iedereen verschillende talen spreekt en begrijpt.

De kleuren van de microfoon wijzigen

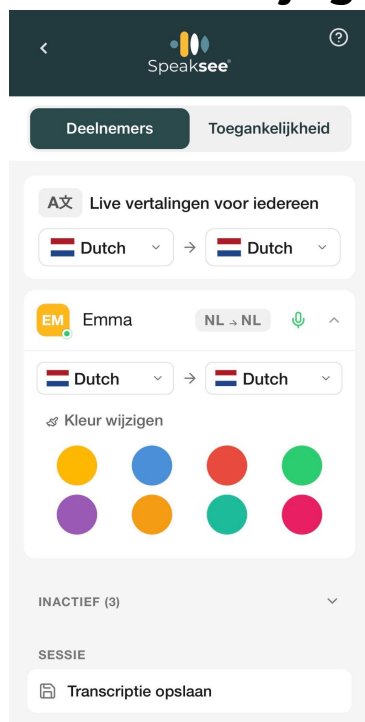


Op het tabblad 'Deelnemers' kun je de kleur van de microfoon wijzigen (zoals deze in de app wordt weergegeven). Zorg ervoor dat de microfoons die je wilt gebruiken, zijn ingeschakeld.

Om de kleur van de microfoon in de app te wijzigen, tik je op het pijltje naar beneden bij de microfoon die je wilt aanpassen. Klik vervolgens op 'Kleur wijzigen'.

Je kunt een kleurpuck uit je draagtas halen en deze verwisselen voor een van de extra kleuren die daarin zitten. Selecteer de huidige kleur van de microfoon en wijzig deze naar de nieuwe kleur die je op je microfoon wilt plaatsen.

De naam van de microfoon wijzigen

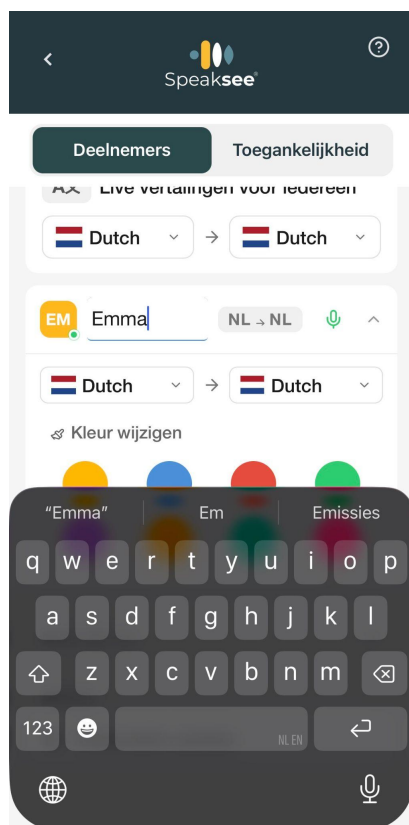


Op het tabblad 'Deelnemers' kun je de naam van de microfoon wijzigen.

Zorg ervoor dat de microfoons die je wilt gebruiken, zijn ingeschakeld.

Om de naam te wijzigen, klik je gewoon op de naam rechts van het gekleurde pictogram.

Als je klaar bent, klik je op het pijltje in de linkerbovenhoek om terug te keren naar het gesprek.


De sessie opslaan

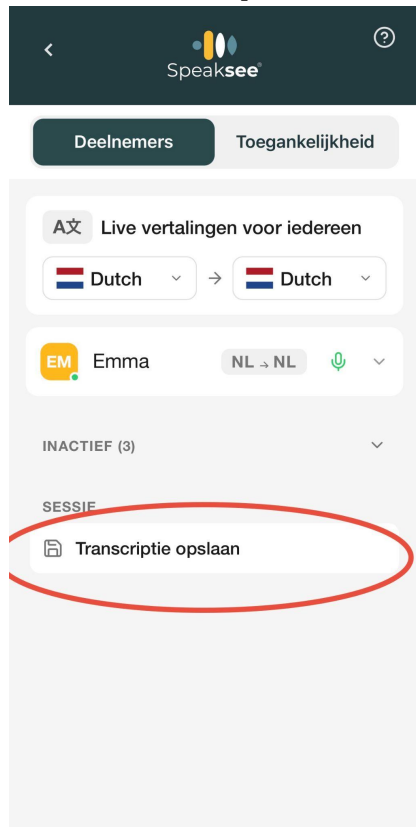

Onderaan bij 'Deelnemers' kun je ook halverwege de sessie opslaan. Zodra je de transcriptie verlaat, moet je deze nog wel downloaden om er weer bij te kunnen.

Leesbaarheid aanpassen

Dit vind je onder het tabblad 'Toegankelijkheid'. Hier kun je de toegankelijkheidsinstellingen aanpassen.

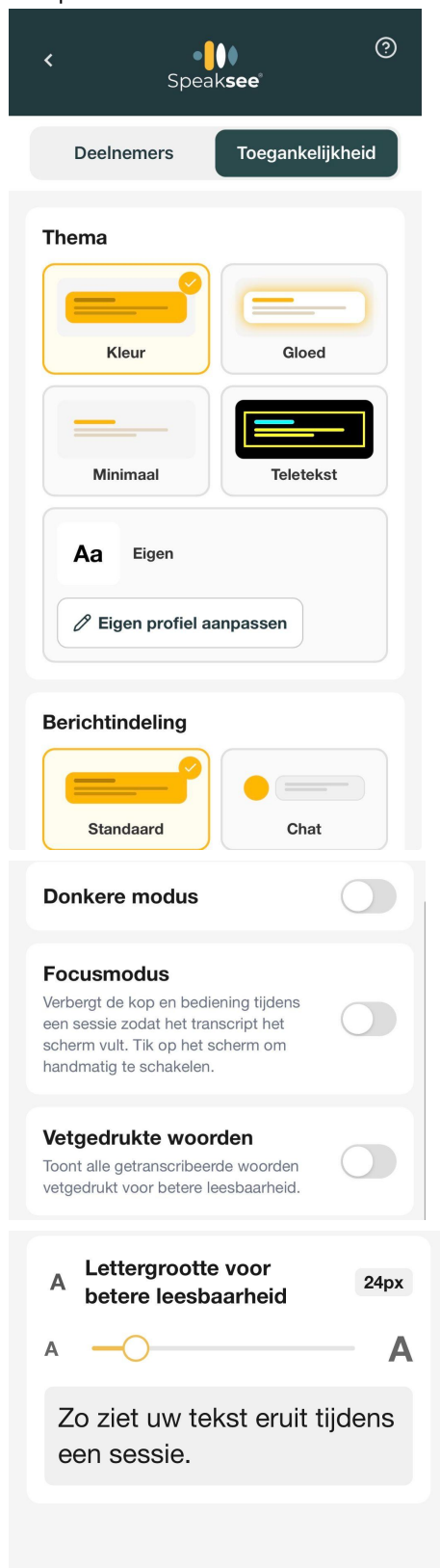

Thema

Kies een thema om het transcriptiescherm naar je eigen voorkeuren in te richten. Je kunt kiezen uit „Kleur”, „Strak” en „Gloed”

Indeling van berichten

Schakel deze optie in als je wilt dat de naam van de persoon buiten de tekstballon wordt weergegeven.

Donkere modus

Als je de schakelaar voor de donkere modus inschakelt, wordt de achtergrond van je transcript zwart. Dit zorgt voor meer contrast en maakt het transcript beter leesbaar.

Focusmodus

Als je deze schakelaar inschakelt, wordt de koptekst verborgen en vult het transcript het volledige scherm van je telefoon/tablet.

Als je teruggaat naar het transcript, tik je op het scherm om de focusmodus in te schakelen. Als je de focusmodus wilt verlaten, tik je nogmaals op het scherm.

Vetgedrukte woorden

Als je deze schakelaar inschakelt, worden alle getranscribeerde woorden vetgedrukt weergegeven.

Lettergrootte

Versleep de balk voor de lettergrootte naar links of rechts om de tekst van de transcripten kleiner of groter te maken.

De sessie delen

Je hebt hier alleen toegang toe als je teruggaat naar de hoofdpagina van de transcriptie.



Met deze functie kun je de huidige, lopende transcriptie in realtime met iemand delen via een QR-code. Die persoon kan het gesprek ook in zijn of haar eigen taal volgen.

Hiervoor moet je teruggaan naar de transcriptiepagina (niet naar de instellingen).

Rechtsboven op het scherm zie je een deelknop (drie puntjes). Klik hierop.

Vervolgens moet je je inloggegevens invoeren (e-mailadres en wachtwoord).

Je kunt desgewenst ook de geldigheidsduur van deze QR-code instellen.

Klik op 'QR-code genereren'. De persoon die het gesprek vervolgens wil volgen, moet de QR-code scannen.

Toetsenbordfunctie

Je hebt hier alleen toegang toe als je teruggaat naar de hoofdpagina van de transcriptie.



Deze functie vind je onderaan het transcriptiescherm.

Met deze functie kun je je antwoord intypen. Het verschijnt dan ook direct in de chat.

Zo kun je actiever aan het gesprek deelnemen.

Bannermodus:

Op de lijn waar je "je bericht kunt typen", kun je de scherm volledig maken. Hierdoor wordt de bannermodus geactiveerd. Hier kun je je bericht typen. Je bericht wordt nu groot op je scherm weergegeven.


Als je rechtsboven op het donderbolletje klikt, gaat je bericht ook knipperen om de aandacht te trekken.

Hello!

VERBINDINGSMODUS WIJZIGEN


Bluetooth: Verbinding via Bluetooth stelt je in staat om de Microphone Kit alleen aan te sluiten op je smartapparaat en direct gebruik te maken van de internetverbinding van je smartapparaat. Het vereenvoudigt de manier van verbinden radicaal, waardoor je overal eenvoudig verbinding kunt maken.


Verbinden via Bluetooth

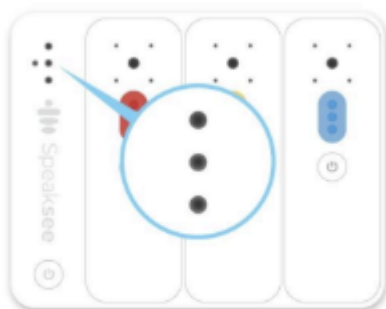


Zet de Microphone Kit aan en zet hem in Bluetooth-modus (door na het aanzetten tweemaal op de aan/uit-knop van het basisstation te drukken).

Druk op de verbindingsknop om je app en de Microphone Kit via Bluetooth met elkaar te verbinden.

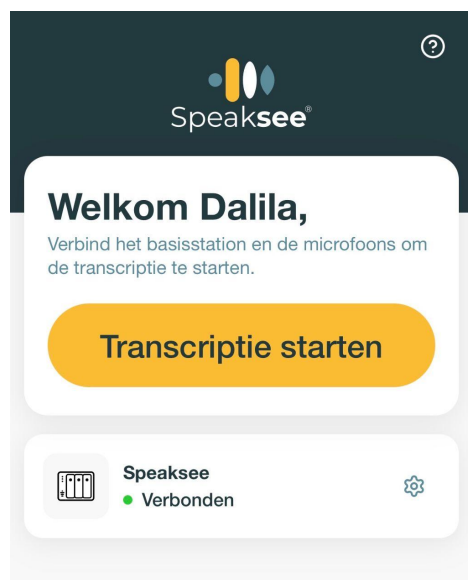

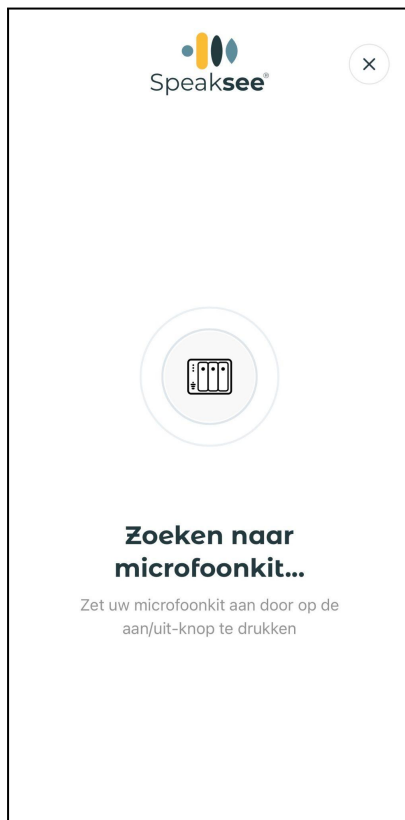

De app gaat vervolgens op zoek naar de Microphone Kit.

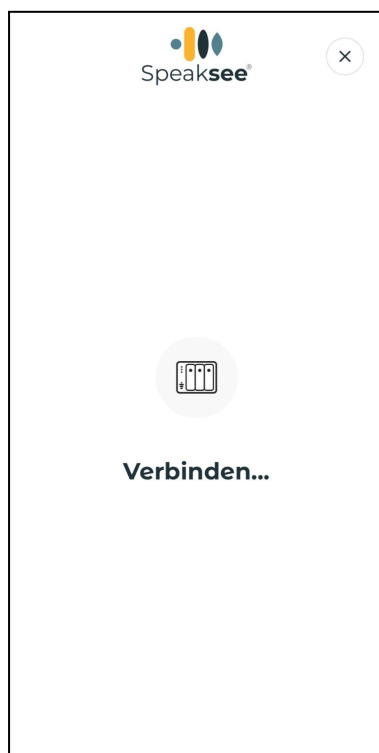

Je Microphone Kit is nu succesvol gekoppeld via Bluetooth.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Legenda van basisstation lampjes

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de betekenis van de kleuren en patronen van de lampjes op het basisstation, ze zijn gegroepeerd op kleur.

Status	Omschrijving	Kleur en interval
	Uit Het basisstation is uitgeschakeld.	Alle 3 de lampjes zijn uit.
	Bluetooth actief Het basisstation wacht op een Bluetooth (BLE)-verbinding met een slim apparaat (telefoon of tablet). Deze modus kan worden geactiveerd via dubbelklikken of wordt automatisch geactiveerd als er geen verbindingen bekend / in de buurt zijn.	Alle 3 de lampjes knipperen langzaam blauw (2 seconden aan, 1 seconde uit).
	Bluetooth verbonden Het basisstation is via Bluetooth met succes verbonden met een telefoon of tablet.	Alle 3 de lampjes zijn constant blauw.
	Software Update De Microphone Kit is een update aan het downloaden en installeren. Laat de microfoons in het laadstation totdat de update is voltooid, wat wordt aangegeven door het uitschakelen van het laadstation.	Alle 3 de lampjes zijn constant fuchsia (roze/paars).
	Update mislukt Er is een fout opgetreden bij het downloaden of installeren van de update. Zorg voor een stabiele internetverbinding en laat de microfoons in het basisstation staan. Als het blijft mislukken, neem dan contact op met support@speak-see.com .	Alle 3 de lampjes knipperen snel fuchsia (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).
	Fabrieksreset geactiveerd Fabrieksreset is handmatig geactiveerd door de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt te houden bij het inschakelen.	1 flits van alle 3 de lampjes in turkoois (lichtblauw).

	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Het wissen van alle gebruikersgegevens, inclusief: Wi-Fi-gegevens, logboeken, gekoppelde microfoons, sprekers namen enz.	Alle 3 de lampjes knipperen langzaam turkoois (2 seconden aan, 1 seconde uit).
--	---------------------------------------	--	--

	Apparaat aangezet	De aan/uit-knop wordt ingedrukt) en het basisstation wordt aangezet.	1 knipperen van alle 3 de lampjes in groen.
	Klaar voor gebruik Het basisstation is klaar om audio te streamen naar de Speaksee clouddienst.	De batterij is tussen 70-100%.	Alle 3 de lampjes branden in groen.
		De batterij is tussen 40-69%.	Het bovenste lampje is uit. De middelste en onderste lampjes zijn constant groen.
		De batterij is tussen 15-39%.	De bovenste en middelste lampjes zijn uit. Het onderste lampje is constant groen.
		De batterij zal binnenkort leeg zijn, plaats de microfoons terug op het basisstation. De batterij is tussen 10-14%.	De bovenste en middelste lampjes zijn uit. Het onderste lampje is afwisselend groen en rood (3 seconden groen, 150 ms rood).
		De batterij is volledig opgeladen.	Alle 3 de lampjes zijn constant groen.
	Opladen terwijl het aan staat Het basisstation is aan het opladen (aangesloten op een stroomvoorziening) en klaar om audio te streamen naar de Speaksee	De batterij wordt opgeladen tussen 70-99%.	Het bovenste lampje knippert groen (1 seconde aan, 1 seconde uit). De middelste en onderste lampjes branden constant groen.

	cloudservice.		
		Opladen van de batterij tussen 40-69%.	Het bovenste lampje is uit. Het middelste lampje knippert groen (1 seconde aan, 1 seconde uit) en het onderste lampje brandt constant groen.
		Opladen van de batterij tussen 0-39%.	De bovenste en middelste lampjes zijn uit. Het onderste lampje knippert groen (1 seconde aan, 1 seconde uit).
	Verbinding verloren	De internetverbinding is verbroken of er is geen communicatie met de Speaksee cloud. Controleer jouw Wi-Fi en zet het uit en weer aan. Als dit blijft gebeuren, neem dan contact op met support@speak-see.com .	Alle 3 de lampjes knipperen snel oranje (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).

	Opstarten	Het basisstation wordt aangezet, maakt verbinding met Wi-Fi en controleert op updates. Dit duurt ongeveer 30 seconden, of langer met meerdere Wi-Fi-netwerken.	Alle 3 de lampjes knipperen langzaam groen (2 seconden aan, 1 seconde uit).
	Opladen terwijl het uitgeschakeld is (in standby) Het basisstation is aan het opladen (aangesloten op een stroomvoorziening)	Het basisstation is volledig opgeladen.	Alle 3 de lampjes zijn constant wit.

	terwijl het uit staat (in standby).		
		Het basisstation laadt op en de batterij is tussen 70-99%.	Het bovenste lampje knippert wit (1 seconde aan, 1 seconde uit). Het middelste en onderste lampje blijven wit branden.
		Het basisstation is aan het opladen en de batterij is tussen 40-69%.	Het bovenste lampje is uit. Het middelste lampje knippert wit (1 seconde aan, 1 seconde uit) en het onderste lampje is constant wit.
		Het laadstation wordt opgeladen en de batterij is tussen 0-39%.	Het bovenste en middelste lampje zijn uit. Het onderste lampje knippert wit. (1 seconde aan, 1 seconde uit).
	Geen batterij	De batterij is te leeg om in te schakelen, bij het indrukken van de aan/uit knop blijft het basisstation uit/ in stand-by	Het bovenste en middelste lampje blijven uit. 1 flits van het onderste lampje in rood.
	Batterij leeg	Het basisstation is uitgeschakeld. De batterij is minder dan 10%.	Het bovenste en middelste lampje zijn uit. Het onderste lampje knippert snel in het rood (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).
	Fatale fout	Er is een fout opgetreden of het basisstation is oververhit geraakt. Probeer het uit en weer aan te zetten. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met support@speak-see.com.	Alle 3 de lampjes wisselen snel tussen rood en wit (0,3 seconden rood, 0,3 seconden wit).

	Volledig uitgezet	Het apparaat is uitgezet.	Alle 3 de lampjes geven 1 flits in rood.
---	-------------------	---------------------------	--

Legenda van het microfoon lampje

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de betekenis van de kleuren en patronen van het microfoon lampje, ze zijn per kleur gegroepeerd.

	Status	Omschrijving	kleur en interval
	Uit	De microfoon is uitgeschakeld in stand-by of volledig uitgezet	Uit.
	Niet gekoppeld	De microfoon is ingeschakeld en wacht om aan een basisstation te worden gekoppeld.	Knippert langzaam blauw (2 seconden aan, 1 seconde uit).
	Bevestiging koppeling	De microfoon is met succes gekoppeld aan een basisstation door hem in het basisstation te plaatsen terwijl het basisstation is ingeschakeld. Zorg ervoor dat er van tevoren een fabrieksreset is uitgevoerd op het basisstation.	1 flits in blauw.
	Updaten	De Microphone Kit is bezig met het downloaden en installeren van een update. Laat de microfoons in het basisstation totdat de update is voltooid, wat wordt aangegeven door het uitschakelen van het basisstation.	Constant fuchsia (roze/paars).
	Updaten mislukt	Er is een fout opgetreden bij het downloaden of installeren van de update. Zorg voor een stabiele internetverbinding en laat de microfoons in het basisstation liggen. Als het blijft mislukken, neem dan contact op met support@speakee-see.com .	Snel knipperend fuchsia (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit). Ingeschakeld

	Aanzetten	De aan/uit-knop is ingedrukt en de microfoon is ingeschakeld.	1 flits in groen.
 	Klaar voor gebruik De microfoon is klaar om audio te versturen naar het basisstation.	De batterij is tussen 15-100%. De batterij zal binnenkort leeg zijn, plaats de microfoon terug in het basisstation. De batterij is tussen 10-14%.	Constant groen. Afwisselend groen en rood (3 seconden groen, 150 ms rood).
	Opstarten	De microfoon wordt aangezet en verbonden met het basisstation. Dit duurt ongeveer 10 seconden.	Langzaam groen knipperend (2 seconden aan, 1 seconde uit).
	Opladen De microfoon wordt opgeladen terwijl hij uit staat (in stand-by).	De microfoon is op het basisstation geplaatst en volledig opgeladen.	Uit.
		De microfoon wordt opgeladen in het basisstation en de batterij is tussen 0-99%	Constant wit.
	In het basisstation geplaatst	De microfoon is met succes in een basisstation geplaatst en daardoor naar stand-by geschakeld.	1 flits in het wit.

	Batterij te leeg	De batterij is te leeg om aan te zetten, bij het indrukken van de aan/uit knop blijft de microfoon uit.	1 flits in het rood.
	Battery leeg	De microfoon is volledig uitgeschakeld. De batterij is minder dan 10%.	Snel knipperend rood (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).
	Fatale fout	Er is een fout opgetreden of de microfoon is oververhit. Probeer hem uit en weer aan te zetten. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met support@speak-see.com .	Snel afwisselend rood en wit (0,3 seconden rood, 0,3 seconden wit).

	Uitgezet	Uitzetten geactiveerd door de aan/uit-knop in te drukken.	1 flits in rood
	Verbinding verbroken	De microfoon kan geen verbinding maken met het basisstation.. Zorg ervoor dat het basisstation is ingeschakeld en dichtbij is. Als dit probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met support@peak-see.com .	Snel knipperend oranje (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit)
	Fabrieksreset geactiveerd	Fabrieksreset is handmatig geactiveerd door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden bij het inschakelen.	1 opname in turkoois (lichtblauw).
	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Wissen van alle gebruikersgegevens, inclusief: logboek, gekoppeld laadstation, enz.	Langzaam knipperend turquoise (2 seconden aan, 1 seconde uit).

Legenda aan/uit-knop bediening

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de betekenis van elke knop interactie die je kunt starten.


Doelstelling	Omschrijving	Indrukking	Terugkoppeling
Aanzetten	Houd de knop ingedrukt om de Microphone Kit aan te zetten.	1 seconde	 De lampjes knipperen 1 maal in groen om het aanzetten te bevestigen.
Uitzetten	Houd de knop ingedrukt om het apparaat uit te zetten. OPMERKING: De microfoons schakelen automatisch over naar de stand-bymodus wanneer ze weer in het basisstation worden geplaatst.	1 seconde	 De lampjes knipperen 1 maal in rood om het aanzetten te bevestigen.


Toevoegen van een Wi-Fi netwerk	Volg de instructies in het menu 'Instellingen' om een nieuwe verbinding toe te voegen. Druk twee keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop terwijl het basisstation is ingeschakeld. Hierdoor wordt Bluetooth geactiveerd. OPMERKING: Dit geldt alleen voor het basisstation.	Dubbel klikken		De lampjes beginnen langzaam blauw te knipperen.
Factory reset	Zorg dat de Microphone Kit uit staat en houd vervolgens de aan/uit-knop minimaal 15 seconden lang ingedrukt.	15 seconden lang indrukken		De lampjes beginnen te knipperen in turquoise.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen



Het is mogelijk om alle gebruikersdata en informatie van de Microphone Kit te wissen door een reset uit te voeren. Voor zowel het basisstation als de microfoons geldt dat je een fabrieksreset kan initiëren door de aan/uit-knop 15 seconden lang ingedrukt te houden bij het inschakelen (vanuit Standby of volledig uit modus). De lampjes zullen langzaam gaan knipperen in turquoise. Het terugbrengen naar de fabrieksinstellingen duurt slechts 15 seconden. Waarna het apparaat automatisch wordt uitgezet in standby.

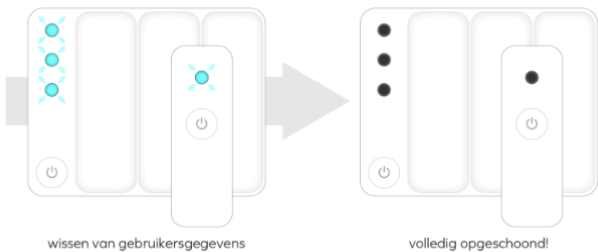Reset van het basisstation Wi-Fi netwerk gegevens, logboeken, informatie over gekoppelde microfoons en kleuren.	Reset van de microfoons Apparaat informatie en gekoppelde basisstations.
	

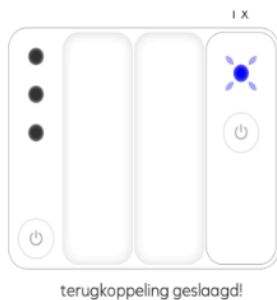


Het basisstation en de microfoons opnieuw koppelen

Nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld, moeten het basisstation en de microfoons opnieuw worden gekoppeld. De microfoons worden gekoppeld door ze terug te plaatsen in het basisstation. Het microfoon lampje knippert eenmaal donkerblauw om de koppeling te bevestigen.

Wachtwoord opnieuw instellen

Je kunt een wachtwoord resetten door op de knop "Wachtwoord resetten" te klikken in de Speaksee app of navigeer naar:

<https://my.speak-see.com/account/password-reset-request>.

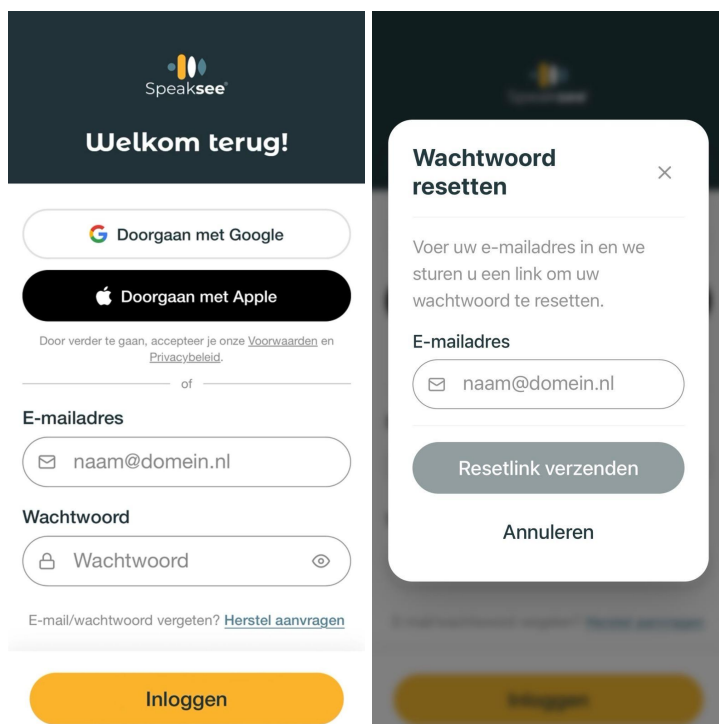

Vul je e-mailadres in en open de link in de e-mail die je hebt ontvangen om je wachtwoord te resetten.

Nadat je je wachtwoord hebt gewijzigd, kun je nu inloggen in de Speaksee app met je nieuwe wachtwoord.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Basisstation	Microfoons, 3 stuks totaal
Uitgangen	USB-C, Audio, Ethernet (Ongeldig)	-
Knoppen	1 x aan/uit-knop	1 x aan/uit-knop
Sensoren	2 x microfoon	4 x microfoon, met een totale gerichte detectiehoek van 35 graden.
LED lampjes	3 x RGB kleuren LEDs	1 x RGB kleuren LED
Stroomtoevoer	5V, 2A (10W)	-
Batterij	1 x 3400 mAh Li-ion	1 x 440 mAh Li-ion

Formaat	Breedte: 12,5 cm Hoogte: 9,8 cm Dikte: 2,5 cm
Gewicht	256 g
Kleur	Wit
In de verpakking	1 x basisstation, 3 x microfoon, 9 x kleurenpuuk, 3 x nekkoord, 1 x internationale adapter, 1 x USB-C kabel, 1 x opbergetui & documentatie.
Draadloze verbindingen	802.11b/g/n (2.4 / 5 GHz) Single / Bluetooth Low Energy (BLE)
Benodigdheden	Wi-Fi internetverbinding Minimum speed: 1.6 Mbps Upload / 1.0 Mbps download Speaksee app op een slim apparaat (telefoon / tablet) met een iOS of Android besturingssysteem en Bluetooth Low Energy.
Certificering	De Microphone Kit is getest door SGS-laboratoria om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de EU, het VK, de VS, Canada en Australië. Beschikt tevens over een ISO 27001-certificaat.
Duurzaamheid	RoHS conform

JURIDISCHE INFORMATIE

Algemene voorwaarden voor gebruik

Het gebruik van de Microphone Kit vereist de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden, die hier kunnen worden gevonden:

<https://speak-see.com/pages/termsandconditions>

Privacybeleid

Zorg ervoor dat iedereen die de Microphone Kit gebruikt ermee instemt dat zijn (audio)gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Speaksee, dat hier kan worden gevonden:

<https://speak-see.com/pages/privacy-policy>

Regelgeving Informatie

	EU declaration of conformity Speaksee B.V. declares that this Microphone Kit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
	FCC statement <u>15.21:</u> The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. <u>15.105(b):</u> This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna.

	• Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. • <u>RF radiation exposure statement:</u> This equipment complies with FCC and IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil (à l'exception du combiné) des utilisateurs.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Le présent appareil est conforme aux Partie 15 des règlements de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
	Canadian compliance statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

	UK compliance representative World Compliance Agency UK Ltd. 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ.
	Australia compliant This Microphone Kit complies with EESS (Electrical Equipment Safety System); and ACMA's requirements.
	WEEE label This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to the designated collection point for the recycling of the waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
	SGS energy efficiency This Microphone Kit meets the relevant standards and specifications, as well as performance requirements.

Belangrijk advies

Lees deze volledige gebruiksaanwijzing voordat je deze Microphone Kit gebruikt.

- **Beoogd gebruik**
 - De Microphone Kit is bedoeld om doven en slechthorenden te helpen bij gesprekken.
- **Opslag**
 - Verwijder voor gebruik de beschermende sticker op elk van de 3 microfoons.
- **Storage**
 - Bewaar de Microphone Kit in de bijgeleverde draagtas wanneer je hem niet gebruikt.
- **Vervoer**
 - Stel de Microphone Kit niet bloot aan mechanische schokken, bijvoorbeeld door hem te laten vallen.
- **Onderhoud**
 - Gebruik alleen een zachte droge doek om de Microphone Kit schoon te maken.

Voorzorgsmaatregelen

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht wanneer je de Microphone Kit gebruikt.

Elektrische schokken en hitte

- Stel deze Microphone Kit of de stroomvoorziening niet bloot aan water of extreme omstandigheden. Extreme omstandigheden zijn onder meer: extreem hoge of lage temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogten.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de stroomvoorziening om elektrische schokken te voorkomen. Verdraai of plet de kabel niet. Gebruik het niet als de kabel of connectors gescheurd of beschadigd zijn.
- Gebruik voor het opladen van deze Microphone Kit uitsluitend de bijgeleverde voeding. Sluit hem niet aan op beschadigde of onveilige stopcontacten.
- Deze Microphone Kit kan tijdens het gebruik warm aanvoelen, dit is normaal.

Pacemakers en andere geïmplanteerde apparaten

Deze Microphone Kit bevat magneten en onderdelen die een elektromagnetisch veld uitstralen en interferentie kunnen veroorzaken met pacemakers of andere elektronische medische apparaten. Raadpleeg voor gebruik uw arts of de fabrikant van het medische apparaat over de vereiste minimale veilige afstand tussen deze Microphone Kit en uw medische apparaat.

Lithium ion batterij

De ingebouwde batterijen van de Microphone Kit mogen niet worden blootgesteld aan de volgende extreme omstandigheden of misbruik door de gebruiker:

- Vervanging van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen.
- Het in vuur of een hete oven gooien van een batterij, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen, wat kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk die kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

CONTACTGEGEVENS

We geven om je

Aarzel niet om contact op te nemen met Speaksee als je vragen of feedback hebt. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten te verbeteren.

Neem contact met ons op via **support@speak-see.com** of vul ons contactformulier in via: **<https://support.speak-see.com/nl/kb-tickets/new>**

De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn te vinden op:

<https://support.speak-see.com/nl>

Aanwezigheid op social media

- Instagram: https://www.instagram.com/speak_see/
- Facebook: <https://www.facebook.com/Speaksee-Benelux>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/speaksee/>
- YouTube:
<https://www.youtube.com/channel/UCQvGf%20iasHyUYZ42RhRsDAMg>

Kantoorlocatie

Speaksee, Admiraliteitsstraat 7, A, 3063 EJ Rotterdam, The Netherlands.